

Почему выбирают Bella Contour

- Единственный прибор, усиливающий метаболизм жировой прослойки.
- Результаты, научно подтвержденные ведущими клиниками США и Израиля.
- Сертификация FDA, ISO и CE.
- Свидетельство МОЗ Украины.
- Более чем 50 000 пациентов по всему миру.
- Точное измерение параметров тела пациента и отчеты о процедурах.
- Возможность пациентом визуально отслеживать улучшения, поэтапно, на протяжении всех процедур.
- Бесплатное обучение персонала с выдачей международного сертификата.

Коррекция фигуры – не единственное достижение аппарата. В списке достоинств также: сокращение растяжек, восстановление после родов, болеутонение, снижение мышечных спазмов, увеличение тока крови, мышечная реабилитация.

Технические спецификации


Напряжение сети	220В, 50 Гц
Мощность ультразвука	0.1 – 1.5 Вт/см ²
Габаритные размеры	65см x 60см x 160см
Вес	75 кг.

Сертификаты

Организация	Номер сертификата	Класс безопасности
FDA	K063728	2
CE	CE 0470	IIa
ISO	ISO13485:2003	NA
Israel Health Administration	11680000	Medical Device
TGA	45591	IIa
МОЗ Украины	7335/2007	IIa

Прогрессивная технология, основанная на естественных процессах организма

Bella Contour – это Резонансное Усиление Метаболизма* Липидов** (Resonant Amplification of Lipid Metabolism). Стимуляция жировых клеток, увеличивающая их проницаемость, и позволяющая жирам выйти из клетки естественным путем, как часть физиологического процесса организма. Свободные жирные кислоты (FFA), выпущенные из жировых клеток, попадают в кровь через лимфатическую систему и используются организмом в качестве энергии. Жировые клетки не разрушаются благодаря безопасному воздействию.

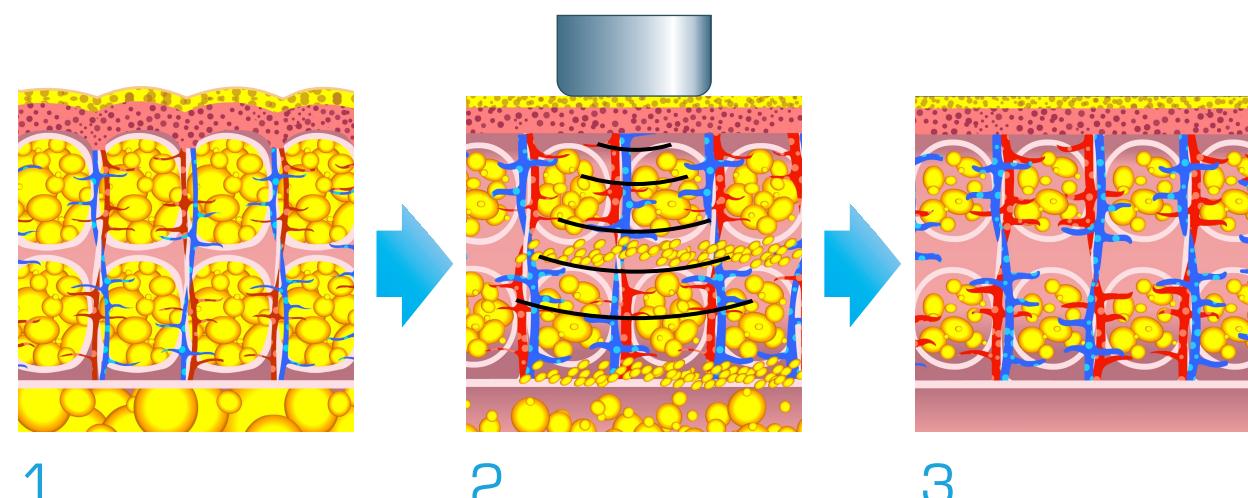

Прибор Bella Contour использует комбинацию двух безоперационных технологий, каждая из которых эффективно влияет на жировую клетку, усиливая метаболизм:

1. Ультразвуковое воздействие

В основе ультразвукового воздействия – создание эффекта резонанса без разрушения клеточной мембрany.

2. Электростимуляция

Помогает липидам покинуть клетку, посредством увеличения ее проницаемости, не ломая клеточной мембрany. Таким образом, липиды становятся доступными для организма и используются в качестве энергии.

* Метаболизм (обмен веществ) – совокупность химических реакций, в результате которых происходит синтез или распад веществ и высвобождение энергии.

** Липиды (FFA) – жиры и жироподобные вещества (жирные кислоты, холестерин), входящие в состав всех живых клеток.

Независимые клинические исследования

Исследование, проведенное крупнейшей больницей Израиля, Медицинским Центром «Хадаса» (Hadassah Medical Center) продемонстрировало, что отдельно взятая процедура на аппарате Bella Contour увеличила процент жира, используемого в качестве источника энергии на 52 %. Увеличение было значительно больше, чем предполагалось. Эффект был замечен независимо от возраста, роста, веса или индекса массы тела.



Отчет об Исследовании: Апрель 2010; Доктор медицинских наук Наама Константини; Доктор медицинских наук Галь Дубнов-Раз.


Интегрированная система обязательной документации процедуры

В конце каждой процедуры аппарат обязывает оператора выполнить замеры участков тела в области применения терапии и сохранить их в системе Bella Contour, а также выполнить фотографии этих участков. Без этих данных система не позволит оператору завершить процедуру. Зафиксированные данные позволяют пациенту отслеживать улучшения поэтапно, на протяжении всех процедур. Сохраненные в системе данные невозможно удалить или исправить.



Безопасное, безболезненное и эффективное лечение

Лечение на аппарате Bella Contour полностью безопасно и длится 40 минут. Хотя результаты лечения уже видны после первой процедуры, рекомендуется полный курс 10–12 процедур для оптимальных и длительных результатов. Процедура воспринимается пациентами как расслабляющая, комфортная, без болевых ощущений.

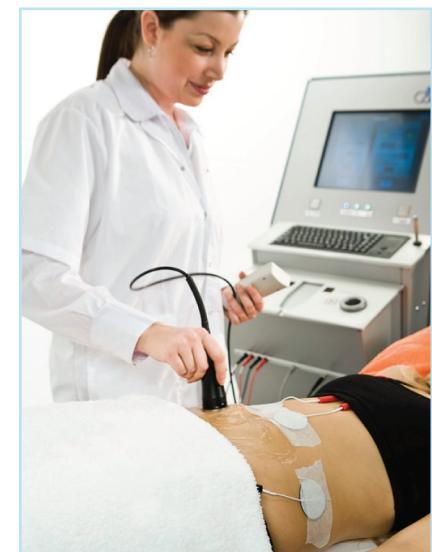


Каждая процедура включает ультразвуковое воздействие двумя различными способами, направленными на глубокое и на поверхностное проникновение в подкожную жировую прослойку.

После процедуры на аппарате Bella Contour не требуется время на реабилитацию. Пациенты могут продолжать свой обычный распорядок дня. Процедура может быть повторена не ранее, чем через 48 часов. Таким образом, полный курс лечения будет закончен через 3 недели.

Программа сравнения фото

Программное обеспечение Bella Contour включает в себя программу сравнения фото, позволяя оператору вместе с пациентом наблюдать за прогрессом и увидеть реальные результаты лечения.

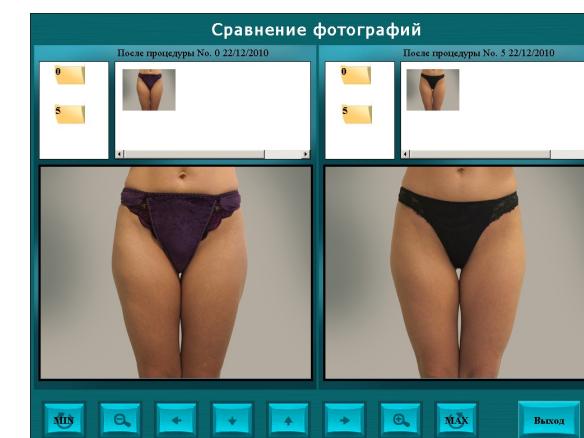

Системные отчеты

У системы есть возможность представлять отчеты о выполнении процедур вместе с фотографиями для пациента, оператора, директора клиники и дистрибутора. Каждый отчет может быть загружен на переносную карту памяти.

